


### Attelle Articulée - Articulated Splint

L'attelle articulée GSM3 permet la suspension complète du membre inférieur et sa mobilisation. Réglable en longueur et largeur, adaptable pour un membre gauche et droit.

The GSM3 Articulated Splint allows the complete suspension of the inferior limb and its mobilisation. Adjustable in length and width, adaptable for left or right leg.

GSM3	4660000157	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
4500	4650000357	Manchon de Rechange Exchange pads

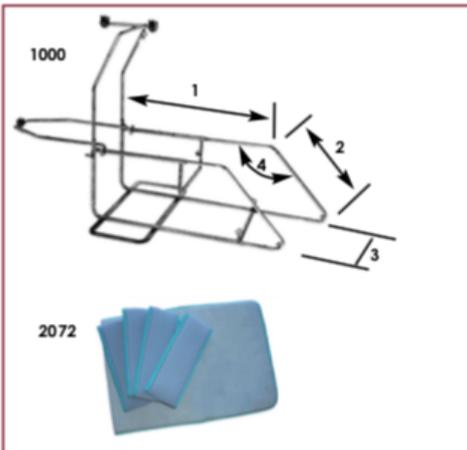

### Attelle Autonome - Independent Splint


L'attelle autonome 1000 ou attelle de "Boppe" permet une mise en place rapide de la traction du membre inférieur car ne nécessite pas l'utilisation d'un cadre complet, nous recommandons cette attelle pour de courte durée d'immobilisation (2 à 3 jours).

The Independent Splint or "Boppe" Splint allows a quick set up of the inferior limb traction because it does not require a complete frame; we recommend this splint only for a short immobilisation period (2 to 3 days).

#### Dimensions - Sizes

1 • Tibia - Tibia	45cm (17.7")
2 • Cuisse - Thigh	30cm (11.8")
3 • Largeur - Width	24cm (9.4")
4 • Angle - Angle	45°

1000	4660000248	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
2072	4650000274	Manchon de Rechange Exchange pads

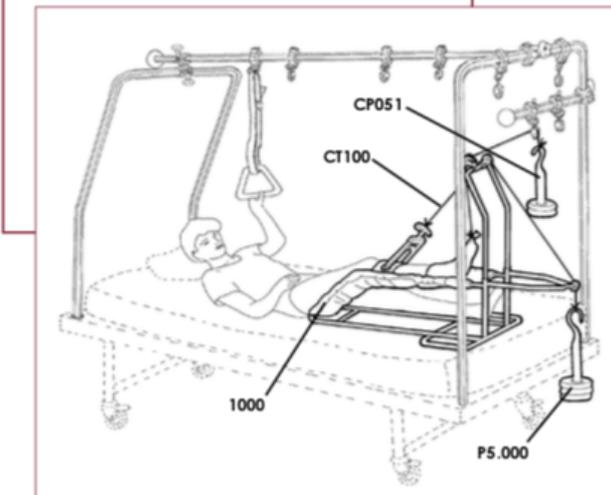

### Kit de Traction - Traction Set

Kit 5 • 4655002556

Kit 5	4655002556	Kit complet	Complete set
		Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
1000	4660000248	Attelle d'immobilisation du genou (x1)	Knee immobilisation splint (x1)
CT 100	4655000211	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)
CP 051	4655000188	Colonne porte poids (x1)	Weight carrier (x1)

## Attelle d'immobilisation - Immobilisation Splint

L'attelle 2060-2064 ou attelle de "Boehler" est une attelle de traction du membre inférieur permettant une grande stabilité et rigueur de positionnement du membre aussi bien dans l'axe du corps que avec une abduction de hanche. Etant suspendue au cadre complet elle facilite les soins de siège et le changement de la literie car rien ne touche le matelas. Livré avec une tube plié à mâchoire fixe de 70 cm.

Nous recommandons ces attelles pour de longue durée d'immobilisation. Existe en version adulte (2060) et enfant (2064).

### Dimensions des attelles

	2060 (Adulte)	2064 (Pédiatrique)
1 • Tibia	35 à 53cm	20 à 40cm
2 • Cuisse	26 à 45 cm	18 à 30cm
3 • Largeur	16 à 30cm	11 à 18cm

The splint 2060-2064 or the "Boehler" splint are traction splints of the lower limb allowing a big stability and a precise positioning of the member in the axis of the body as well as an hip abduction.

The complete suspension to the frame facilitates and ease bedding changes as none of the parts are in contact with the mattress. Delivered with a folded tube with a fixed clamp of 70cm (28").

We recommend those splints for a long term immobilisation period.

Available in Paediatric version (2064) and Adult version (2060).



### Sizes splints

	2060 (Adult)	2064 (Paediatric)
1 • Tibia	35 to 53cm (14" to 21")	20 to 40cm (8" to 16")
2 • Thigh	26 to 45 cm (10" to 18")	18 to 30cm (7" to 12")
3 • Width	16 to 30cm (6" to 12")	11 to 18cm (4" to 7")

2060 Equi*	4660000280	Attelle Adulte complète avec manchon Complete Adult Splint with pads
2064 Equi*	4660000291	Attelle Pédiatrique complète avec manchon Complete Paediatric Splint with pads
2072	4650000274	Manchon de Rechange pour 2060 et 2064 Exchange pads for 2060 and 2064

Voir chapitre "Kit de traction" pour le kit complet avec poids et accessoires.

See "Traction Sets" Chapter for the complete set with weights and accessories.

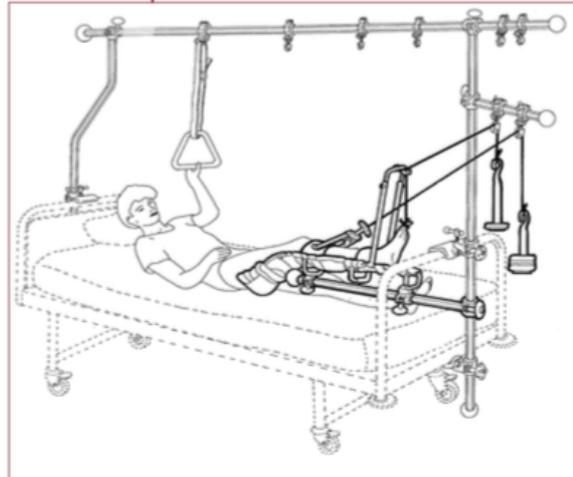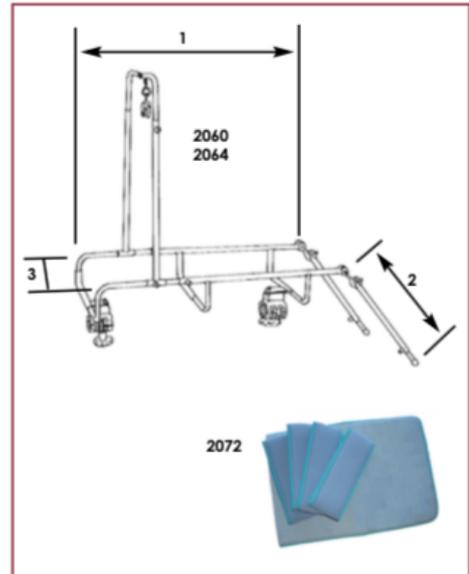

## Attelle en " U " - " U " Splint

L'attelle en " U " permet une traction ou une suspension du membre inférieur.  
Longueur standard de l'attelle 56cm, avec une largeur de 20cm. Chaque élément peut être vendu séparément.

The " U " Splint allows traction or suspension of the inferior limb. Standard length: 56cm (22"), width: 20cm (8"). Each part can be sold separately.

1050	4660000058	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
1052	4650000232	Manchon de rechange Exchange pads
A	4671000485	Etrier de suspension " U " Splint
B	4671001243	Serre Broche (ø 2,4mm maxi) Pin clamp (ø2.4mm maxi)
C	4625001033	Vis violon Screw
D	4671000500	Support Etrier Staple

