

**kinetec**<sup>®</sup>

cadres de traction  
traction frames

**GAMME DE PRODUITS**  
**PRODUCT RANGE**



# Création d'un Nouveau Cadre - New Traction Frames

Le système de Traction Kinetec est modulable et adaptable à tous types de lits, afin de respecter les réglementations de sécurité relatives aux Dispositifs Médicaux de Classe 1, nous avons mis en place une procédure pour la création d'un nouveau cadre qui commence par la prise de mesures du lit, l'idéal étant que nous puissions avoir un lit à disposition dans nos locaux.

The Kinetec Traction system is flexible and adaptable to all types of beds, in order to respect the regulation of safety relating to the Medical Devices of Class 1, we set up a procedure of creation for new frames which starts with the measurements of the bed, the ideal procedure is to have a bed at disposal in our manufacturing plant.

**Pour toute demande de réalisation spéciale, merci de nous retourner le formulaire ci-dessous.**

Dans tous les cas mentionner la marque et le type de lit.

Important : Vérifier si toutes les portes du service et ascenseur sont égales ou supérieures à 2m (si inférieures, nous communiquer la hauteur des portes)

Si possible photos du lit avec détails des points de fixation du cadre.

**For special requests, please provide us with the below form and details.**

**Please mention the brand and the type of bed on every request.**

**Important: Please make sure all doors and elevators entrances are 2 meters high (79"). (Mention if they are lower or equal).**

**If possible pictures of the bed with details of the fixation points of the frames.**

## Pour un cadre avec portique - For a frame with Porch

Type de lit - Bed Type : \_\_\_\_\_

A • Entraxe des trous support portique pied de lit.

Distance between centres of the holes of the porch support on the foot end. \_\_\_\_\_

B • Entraxe des trous support portique tête de lit.

Distance between centres of the holes of the porch support on the head end. \_\_\_\_\_

C • Hauteur du lit en position basse (aux trous support portique).

Height of the bed in low position (from porch support holes). \_\_\_\_\_

D • Détails des trous de support portique.

Details of the holes of porch support. \_\_\_\_\_

E • Longueur du lit (entraxe des trous de support portique).

Length of the bed (Distance between centres of the holes of the porch support). \_\_\_\_\_

F • Si lit électrique, mentionner la position de la borne de terre du lit.

If this is an electric bed, please mention the position of the ground connector of the bed. \_\_\_\_\_

## Pour la réalisation d'un dossieret technique - For a frame with a removable foot end

Type de lit - Bed Type : \_\_\_\_\_

G • Entraxe des longerons du lit.



Distance between the parallel outer poles of the bed. \_\_\_\_\_

H • Dimensions intérieures des longerons du lit.

The inside dimensions of the parallel outer poles of the bed. \_\_\_\_\_

I • Hauteur du sol au bord supérieur des longerons du lit (lit position basse).

Height of the bed in low position (from the superior side of the parallel outer parallel outer poles of the bed). \_\_\_\_\_

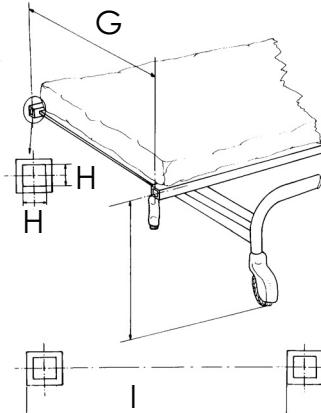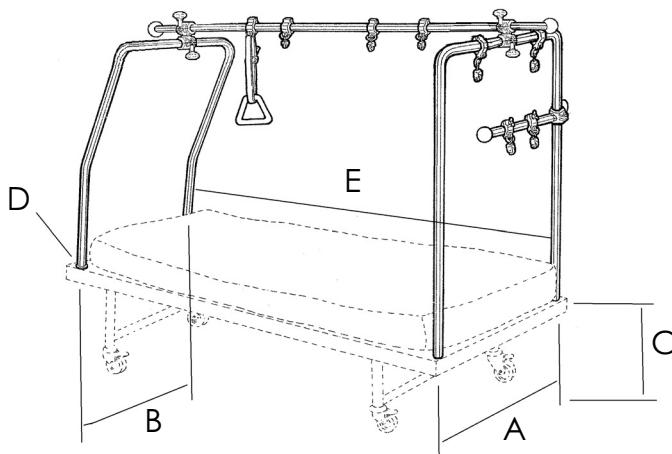

# Sommaire .....Contents

**Description .....Description ..... 3-4**

**Les pièces du Système .....Parts of the System ..... 5-8**

Accessoires de Traction .....Traction Accessories ..... 10

Attelles de traction / Suspension .....Traction / Suspension Splints ..... 12-14



**Les montages sur différents lits .....Assemblies on various beds**

Montage de Base sur lit Adulte .....Universal Fixation Frame on Adult bed ..... 15

Montage parcellaire sur lit Adulte .....Partial Assembling on Adult Bed ..... 16

Montage de base sur lit Pédiatrique .....Universal Fixation Frame on Paediatric bed ..... 17

**Les Kits de traction .....Traction Sets**

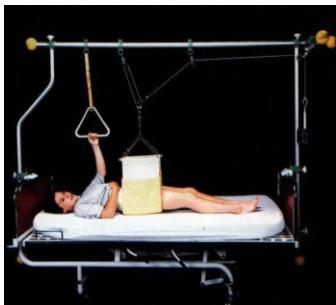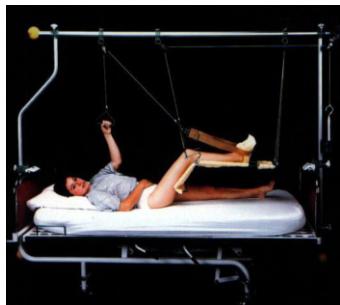

Parce que nous cherchons toujours à améliorer nos produits, Kinetec se réserve le droit d'y apporter des modifications techniques sans préavis.

Because we are constantly looking for ways to improve our machines,  
Kinetec reserves the right to make technical modifications without notice.



Dispositif Médical de Classe 1.  
Medical Term Class 1.

**kinetec®**

**KINETEC SAS**  
Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



contact@kinetec.fr



[www.kinetec.fr](http://www.kinetec.fr)

# Description


Le Système de **TRACTION KINETEC** est un matériel conçu et expérimenté en milieu hospitalier dans le but de permettre tous montages de :

**TRACTION,**  
**SUSPENSION,**  
**MOBILISATION,**  
**POSTURE,**

autour de n'importe quel lit d'hospitalisation d'adulte ou d'enfant.

Le Système de TRACTION KINETEC se compose :

- de **TUBES OCTOGONAUX** en **ALUMINIUM ANODISE** de 34mm sur plat, à haute résistance, de présentation satinée et luxueuse,
- de **MACHOIRES CRANTEES** offrant **SEIZE POSITIONS** autour de l'axe du tube et assurant une prise indéréglable,
- d'une **INTERFACE DE FIXATION** permettant l'ancrage, en tête, pied ou en transversale du lit,
- de **PORTE-POULIES** assurant le libre jeu de la poulie dans tous les axes, éliminant ainsi toute force de friction ou déraillement de la corde de traction,
- d'**ACCESSOIRES DE TRACTION** permettant un positionnement précis du membre à mobiliser.

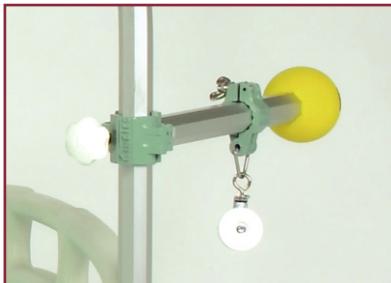

Le Système de **TRACTION KINETEC** peut résoudre tous les problèmes de pratique quotidienne que posent :

- l'Orthopédie,
- la Rééducation au lit et dans la chambre du malade,
- la Rhumatologie et la médecine de Réhabilitation
- la Neurologie,

mais aussi l'Assistance aux alités et Handicapés physiques dans les différents services :

- Médecine,
- Urgence,
- Chronique,
- Convalescents
- Gériatrie
- Soins intensif.



Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

KINETEC garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



# Description

The **KINETEC TRACTION** System is a product developed and tested in order to enable any set up for:  
**TRACTION,**  
**SUSPENSION,**  
**MOBILISATION,**  
**POSTURE,**

adaptable on all adult or child hospitalization bed.

The KINETEC TRACTION System is composed of:

- **OCTAGONAL TUBES** of **ANODISED ALUMINIUM** of 34mm, high-strength, of glossed and luxurious presentation,
- **NOTCHED HOLDING CLAMPS** offering **SIXTEEN POSITIONS** around the tube axis and assuring against dislocation
- a **FIXING INTERFACE** allowing anchoring, at the head, foot or in transversal of the bed,
- **CARRY-PULLEYS** ensuring free plan of the pulley in all axes, thus supressing force from friction or derailment of the traction cord,
- **TRACTION ACCESSORIES** allowing a precise positioning of the mobilized limbs.

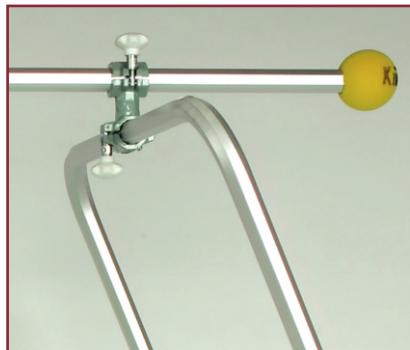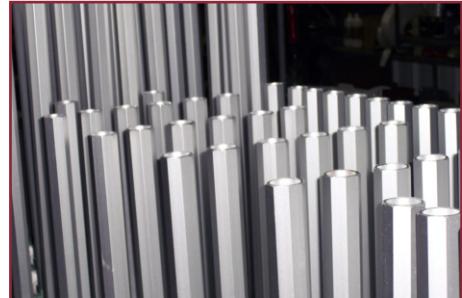

The **KINETEC TRACTION** System solves the daily needs in:

- Orthopaedics,
- Rehabilitation with the bed and in the room of the patient,
- Rhumatology and the medicine of Rehabilitation,
- NEUROLOGY,
- Emergency wards,

but also Assistance for bedridden and physically handicapped patients in the various services:

- Medicines,
- Emergency,
- Chronicles,
- Convalescents,
- Geriatrics,
- Intensive care.


Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC TRACTION System is easy to use for all medical staff.

KINETEC guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

# Les Pièces du Système - Parts of the System

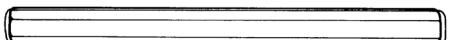


## Barres - Bars

B 240	4655000071	Barre renforcée de 240cm Reinforced Bar 240cm (94")
B210	4655000055	Barre renforcée de 210cm Reinforced Bar 210cm (83")
BT H	4655001110	Barre renforcée télescopique Telescopic Reinforced Bar
B140	4655004445	Barre de 140cm Bar 140cm (55")
B120	4655003512	Barre de 120cm Bar 120cm (47")
B110	4655004015	Barre de 110cm Bar 110cm (43")
B100	4655003687	Barre de 100cm Bar 100cm (39")
B95	4655000039	Barre de 95cm Bar 95cm (37")
B80	4655000021	Barre de 80cm Bar 80cm (31")
B40	4655002845	Barre de 40cm Bar 40cm (15")




## Tube à Mâchoire Fixe - Fixed Clamp Bar

B200M Equi	4655003611	Tube renforcée de 200cm Reinforced Bar 200cm (78")
T180	4655002978	Tube renforcée de 180cm Reinforced Bar 180cm (71")
T120	4655000782	Tube de 120cm Bar 120cm (47")
T70 Equi*	4655003207	Tube de 70cm Bar 70cm (28")
T40 Equi*	4655003067	Tube de 40cm Bar 40cm (16")
T25 Equi*	4655003083	Tube de 25cm Bar 25cm (10")
T13 Equi*	4655003075	Tube de 13cm Bar 13cm (5")

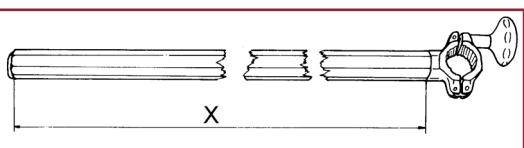


## Tube Droit à Mâchoire Pivotante - Straight Bar With Swivel Clamp Bar

TP140	4655001475	Bar de 140cm Bar 140cm (55")
TP160	4655000857	Bar de 160cm Bar 160cm (63")

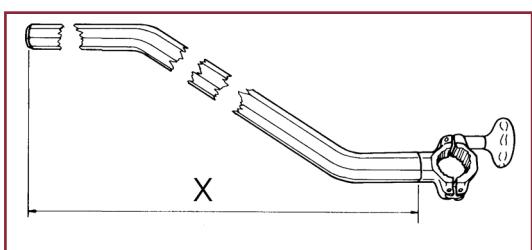


## Tube en "Col de Cygne" à Mâchoire Pivotante - Offset Bar With Swivel Clamp Bar

TCY14	4655001483	Tube de 140cm Bar 140cm (55")
TCY16	4655000790	Tube de 160cm Bar 160cm (63")

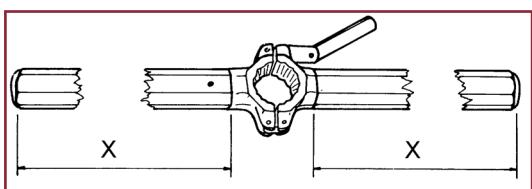

## Tube à Mâchoire Centrale - Center Clamp Bar

TM70 Equi*	4655003158	Bar de 2x35cm Bar 2x35cm (14")
TM140	4655001467	Bar de 2x70cm Bar 2x70cm (28")

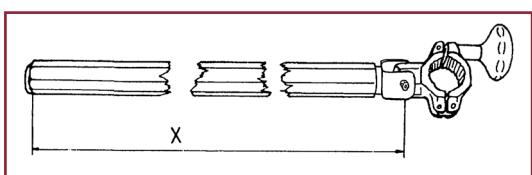

## Barre Renforcée à Mâchoire Articulée - Reinforced bar with Articulated Clamp

BM240M	4655000089	Bar de 240cm Bar 240cm (94")
BM210M	4655000063	Bar de 210cm Bar 210cm (83")

\* Sur un lit électrique, utiliser uniquement les éléments Kinetec désignés "Equi", permettant la continuité de terre.

\* On a electrical bed, please use only the Kinetec components described as "Equi" (Medical Equipment Potential Equalization) allowing the grounding continuity.




# Les Pièces du Système - Parts of the System

## Tube Droit à 2 Mâchoires (1 fixe et 1 pivotante)

### Straight Bar with 2 Clamps (1 swivel and 1 fixe)

TD2M\* 4655000823

Tube réalisé sur mesure,  
toutes dimensions possible  
Bar can be customized,  
Realization in all dimensions

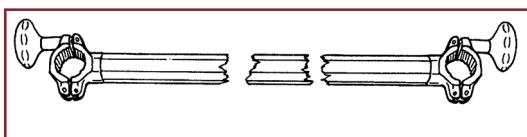


## Tube en "Col de Cygne" à 2 Mâchoires

### (1 fixe et 1 pivotante)

### Offset Bar with 2 Clamps (1 swivel and 1 fixe)

TCY2M\* 4655000807

Tube réalisé sur mesure,  
toutes dimensions possible  
Bar can be customized,  
Realization in all dimensions

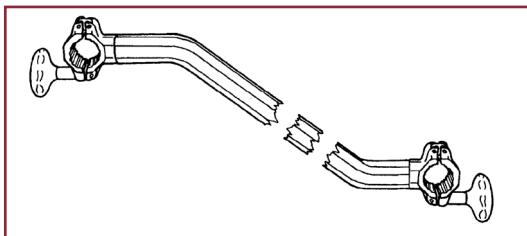


## Portique - Porch

PR01\* 4655000633

Portique Fixe, réalisé sur mesure,  
toutes dimensions possible  
Fixed Porch Bar, can be customized,  
Realization in all dimensions

PR02\* 4655000641


Portique Articulé, réalisé sur mesure,  
toutes dimensions possible  
Movable Porch Bar, can be customized,  
Realization in all dimensions

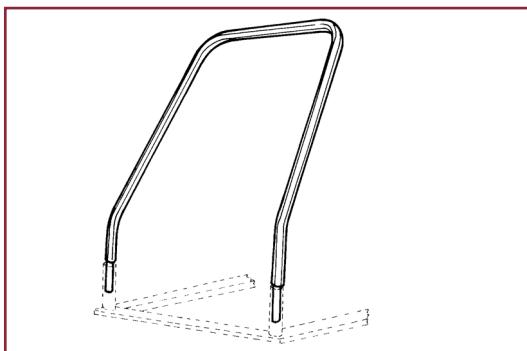

## Barre Cintrée - Shaped Bar

BC120 4655000097

Barre Cintrée de 120cm  
"L" Shaped Bar 120cm (47")

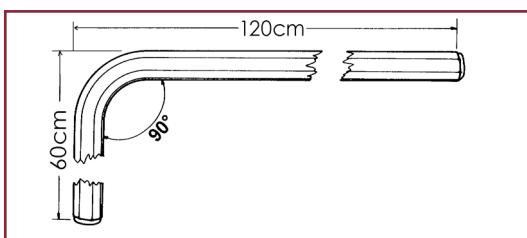

## Barre en "U" - "U" Shaped Bar

BU77 4655000120

Barre de X=77, Y=80cm  
Bar X=77, Y=80cm(X=30, Y=32")


BU85 4655003588

Barre de X=77, Y=85cm  
Bar X=77, Y=85cm(X=30, Y=34")

BU109 4655000138

Barre de X=109, Y=120cm  
Bar X=109, Y=120cm(X=43, Y=47")


Les Barres en "U" ont une gravure de réglage de 5cm en 5cm.  
Adjustment prints every 5cm (2").

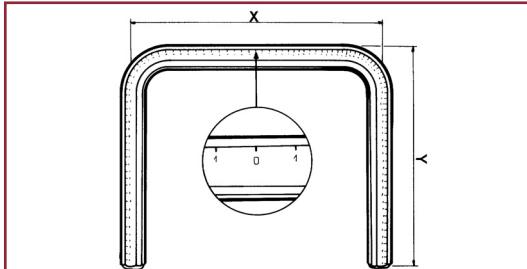

## Sphère de Protection - Wall Protection Cushion

SP01 4635001304


Sphère de protection  
Wall Protection Cushion

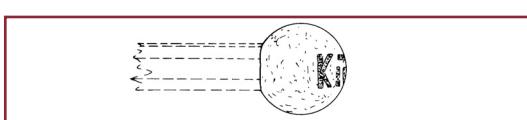

## Butée de Protection - Rollertype Wall Protection

BP94 4655000104


Butée de Protection  
Rollertype Wall Protection

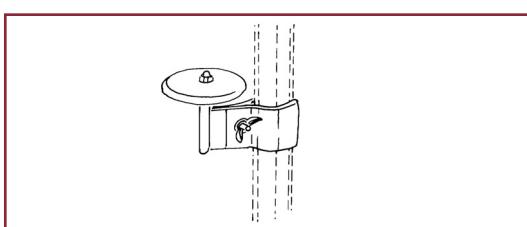

\* Pour commander : veuillez nous retourner la feuille de mesures, voir au début du catalogue.


\* To order: please fill in data from as in the first page of the catalogue and return.

# Les Pièces du Système - Parts of the System

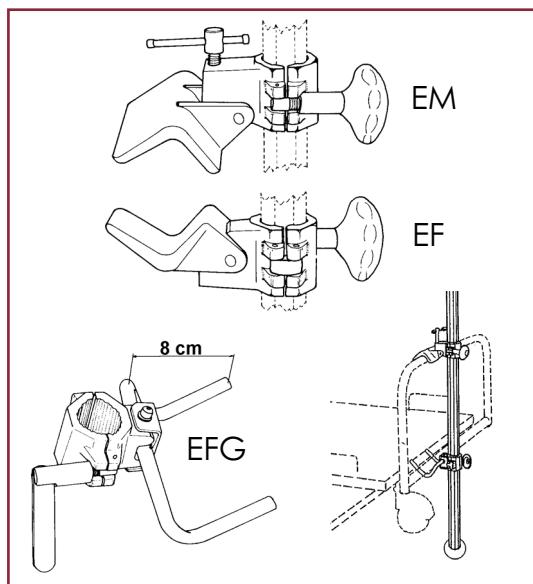


## Etau - Panel Clamp

EM	4655000344	Etau Mobile Upper Clamp (movable)
EF	4655000328	Etau Fixe Lower Clamp (fixed)
EFG	4655000336	Etau Fixe à Griffes (8cm) Lower Clamp with special jaws of 8cm (3")

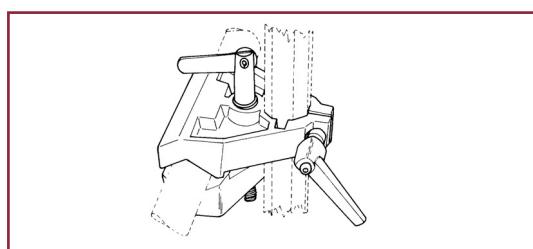

## Presse Universelle - Universal Clamp

PU03	4655000683	Presse universelle pour tube rond Universal Clamp for round tube
------	------------	---

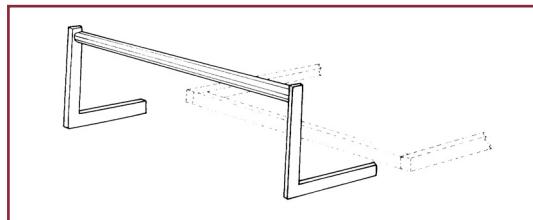


## Dosseret Technique - Removable Foot End

DC27*	4655000229	Dosseret, réalisé sur mesure, toutes dimensions possibles Removable Foot End, can be customized, Realization in all dimensions
-------	------------	---



## Double Mâchoire - Double Clamp

DME Equi**	4655003059	Fixe Fixed
DMEP Equi**	4655003398	Pivotante Swivelled

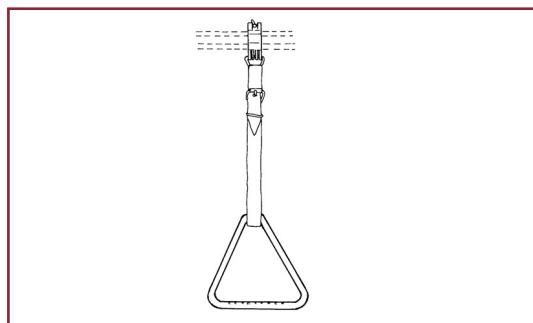

## Etrier de Traction - Handgrip

P753	4655000948	Etrier de Traction Handgrip
------	------------	--------------------------------

Poids maximum de traction :  = 75Kg

Maximum traction weight :  = 75Kg

\* Pour commander : veuillez nous retourner la feuille de mesures, voir au début du catalogue.


\* To order: please fill in data from as in the first page of the catalogue and return.

\*\* Sur un lit électrique, utiliser uniquement les éléments Kinetec désignés "Equi", permettant la continuité de terre.

\*\* On a electrical bed, please use only the Kinetec components describe as "Equi" (Medical Equipment Potential Equalization) allowing the grounding continuity.


### 4655000401 - GRC 012

Poulie Double sur Colonne  
Double pulley on Column

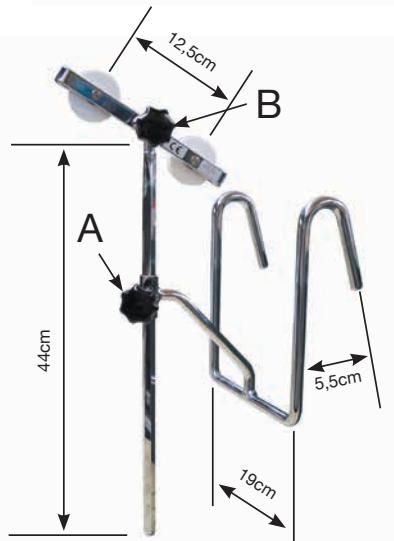

Utilisable sur lit équipé de panneau de pied de lit.  
Réglage vertical large(A).  
Réglage vertical précis (B).  
Les poulies sont de type fermées.

Only for bed equipped with foot board.  
Large vertical adjustment (A).  
Precise vertical adjustment (B).  
The pulley are closed.

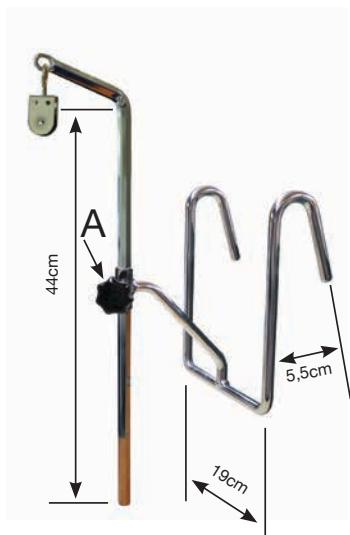

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.




Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)



### 4655004669 - T COURBE 98-65

Barre courbe  
*Curved bar*

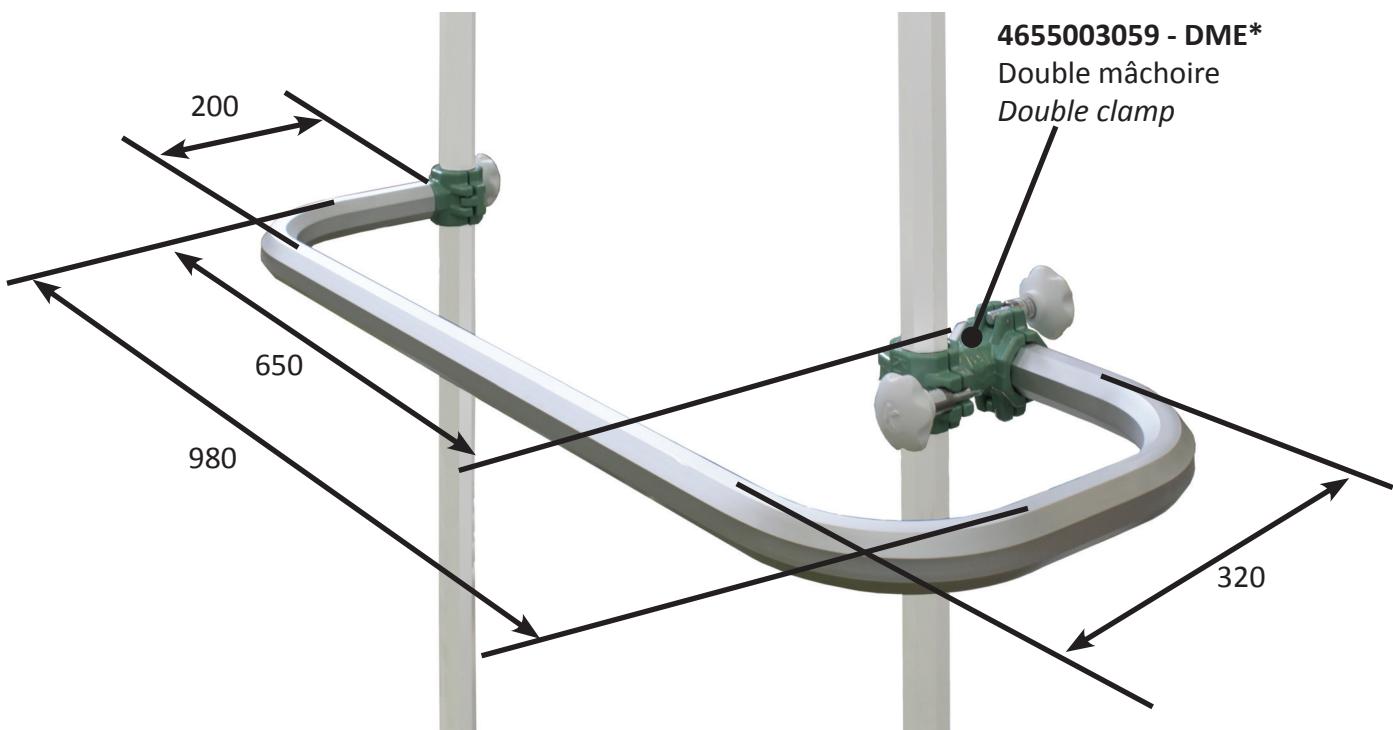

La T-Courbe Kinetec® permet de rallonger le cadre de traction en pied ou en tête de lit, mise en place rapide et stable.

Cette barre permet :

- le positionnement précis de la poulie de traction,
- la traction bilatérale,
- la traction pour patient de grande taille.

\*La T-Courbe Kinetec® doit toujours être utilisée avec une double mâchoire (4655003059) à commander séparément.

*The T-Courbe Kinetec® allows to extend the traction frame in foot or headboard, easy setup and stable position.*

*This bar allows:*

- accurate positioning of the pulley traction,
- bilateral traction,
- traction for tall patient.

*\* The T-Courbe Kinetec® should always be used with a fixed double clamp (4655003059) need to be ordered separately.*



(1) Présentée avec une poulie ouverte sur mâchoire (4655004255)  
(1) Shown with a fixed open pulley on clamp (4655004255)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)

## Poulie - Pulley



**PPO**  
**4655000617**

Porte Poulie Ouverte, le montage peut être modifié à tout moment sans démonter la totalité du circuit.

Matière : Aluminium, Acier, Polypropylène.

*Open Pulley, position of pulley can be changed without dismantling the frame.*

*Material: Aluminium, Steel, Polypropylene*



**PPF**  
**4655000625**


Porte Poulie Fermée, système adapté pour les enfants ou les comateux.

Matière : Aluminium, Acier, Polypropylène.

*Closed Pulley, specially desogned for childrens, or restless comapatients.*

*Material: Aluminium, Steel, Polypropylene*

Poids maximum de traction :  
Maximum traction weight :

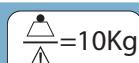

**POFM**  
**4655004255**

Poulie ouverte fixe sur mâchoire, le montage peut être modifié à tout moment sans démonter la totalité du circuit, la poulie est fixe.

Matière : Aluminium, Acier, Polypropylène.

*Fixed open pulley on clamp, position of pulley can be changed without dismantling the frame, the pulley is fixed.*

*Material: Aluminium, Steel, Polypropylene*

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)

# Poids & Corde - Weights & Cord

**CP051**  
**4655000188**



**P1.000**  
**4655000534**



**P500**  
**4655000526**



**P250**  
**4655000518**



**CT100**  
**4655000211**



Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)


Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)

# Les Pièces du Système - Parts of the System

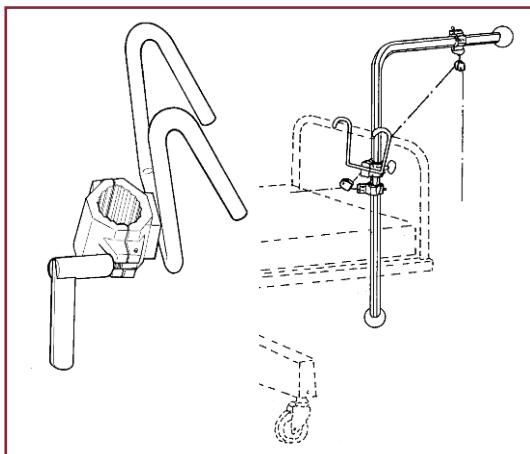

## Mâchoire à Griffes - Clamp with Large Claws

MG01 4655000493


Mâchoire à Griffes  
Clamp with large claws



## Porte Serum - I.V. Holder

TPS01 Equi\* 4655003091

Tige Porte Serum  
I.V. Holder Shaft

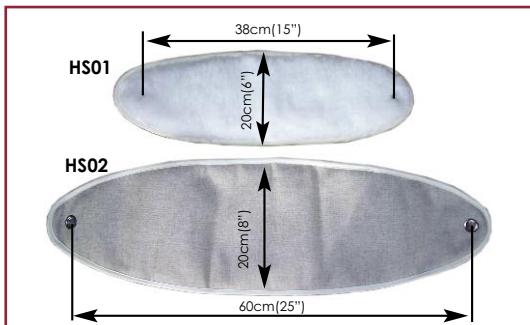


## Hamac de Suspension - Hammock

HS01 4650000042

Petit Modèle  
Small hammock

HS02 4650000050

Grand Modèle  
Large hammock

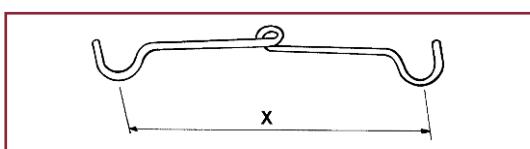


## Fléau de Suspension - Spreader Bar

FS01 4655000360

Pour Hamac Petit Modèle, x=18cm  
For Small Hammock, x=18cm (7")

FS02 4655000378

Pour Hamac Grand Modèle, x=26cm  
For Large Hammock, x=26cm (10")

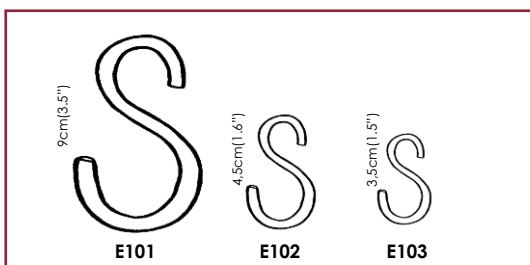

## Esses - S-Hooks

E101 4655000295

Grand Modèle - 9cm(jeu de 10)  
Large - 3.5" (set of 10)

E102 4655000302

Moyen Modèle - 4.5cm (jeu de 10)  
Medium - 1.6" (set of 10)

E103 4655000310

Petit Modèle - 3.5cm (jeu de 10)  
Small - 1.5" (set of 10)



### Mentonnière pour traction Cervical collar for traction



**4650000117**

Mentonnière - Adulte  
Cervical collar - Adult

**4650001933**

Mentonnière - Enfant  
Cervical collar - Children

AFIN D'ASSURER UNE HYGIENE MAXIMUM, CHANGER LA MENTONNIERE A CHAQUE NOUVEAU PATIENT.

NETTOYAGE :

Lavage à 30°C avec utilisation d'un désinfectant au cours du cycle de rinçage.

Exemple de produits de désinfection ; solution Bac linge à 0,125% ou Souplanios à 0,125% des Laboratoires ANIOS.

TO ENSURE MAXIMUM HYGIENE, CHANGE THE CERVICAL COLLAR FOR EACH NEW PATIENT.

CLEANING

Washing at 30 ° C with use of a disinfecting solution during the rising cycle.

Example of product which can be used: Solution « Bacling » at 0.125 % or « Souplanios » at 0,125% from ANIOS Laboratory.

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

# kinetec®

**Kinetec SAS**

Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



contact@kinetec.fr



[www.kinetec.fr](http://www.kinetec.fr)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)

# Les Pièces du Système - Parts of the System


## Hamac Plevien - Pelvic Sling

Le hamac de suspension pelvienne permet une immobilisation ou stabilisation du rachis.

The pelvic sling allows an immobilisation or a stabilisation of the rachis.

HSP01	4655000451	Hamac de suspension Pelvienne Complet Complete Pelvic Sling
HSP11	4650000068	Manchon de Recharge Exchange pads

Voir chapitre " Kit de traction " pour le kit complet avec poids et accessoires.  
See "Traction Sets" Chapter for the complete set with weights and accessories.

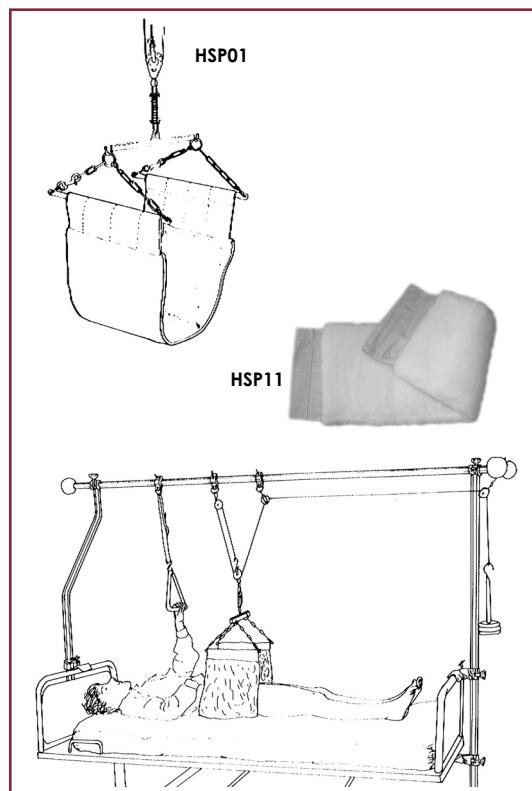




## Attelle en " U " - " U " Splint

L'attelle en " U " permet une traction ou une suspension du membre inférieur. Longueur standard de l'attelle 56cm, avec une largeur de 20cm. Chaque élément peut être vendu séparément.


The "U" Splint allows traction or suspension of the inferior limb. Standard length: 56cm (22"), width: 20cm (8"). Each part can be sold separately.

1050	4660000058	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
1052	4650000232	Manchon de recharge Exchange pads

A	4671000485	Etrier de suspension "U" Splint
B	4671001243	Serre Broche ( $\varnothing$ 2,4mm maxi) Pin clamp ( $\varnothing$ 2.4mm maxi)
C	4625001033	Vis violon Screw
D	4671000500	Support Etrier Staple

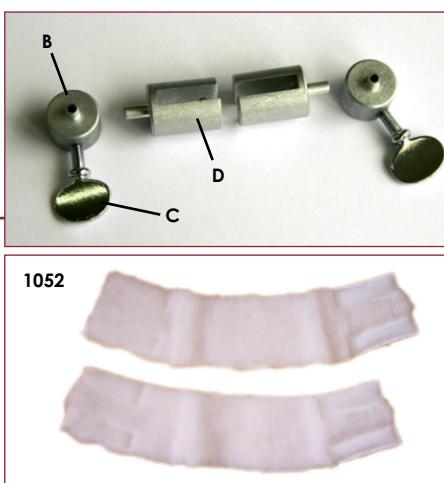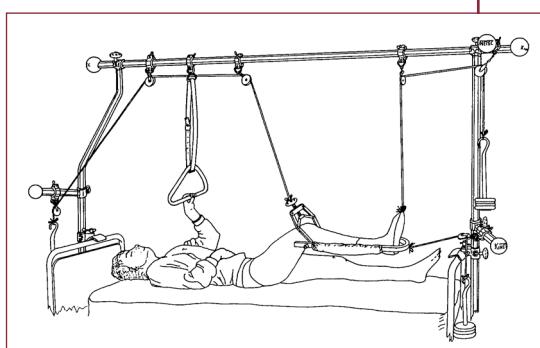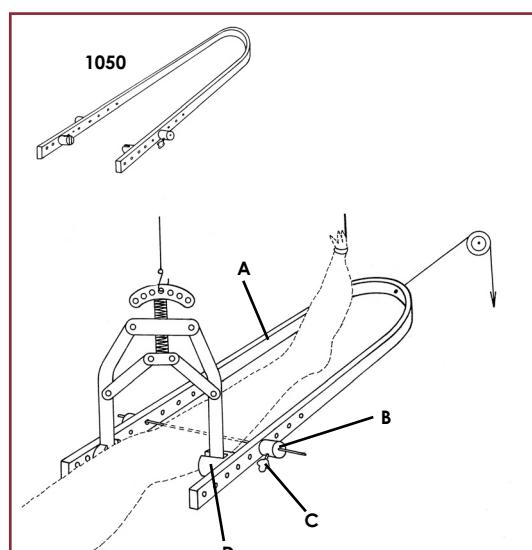

# Les Pièces du Système - Parts of the System

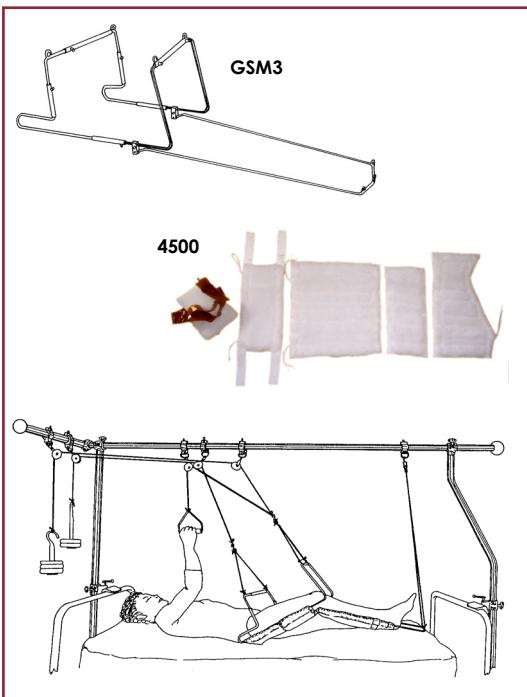


## Attelle Articulée - Articulated Splint

L'attelle articulée GSM3 permet la suspension complète du membre inférieur et sa mobilisation. Réglable en longueur et largeur, adaptable pour un membre gauche et droit.

The GSM3 Articulated Splint allows the complete suspension of the inferior limb and its mobilisation. Adjustable in length and width, adaptable for left or right leg.

GSM3	4660000157	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
4500	4650000357	Manchon de Rechange Exchange pads

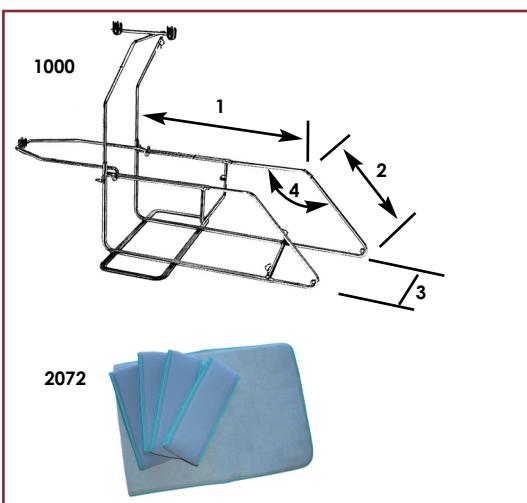

## Attelle Autonome - Independent Splint


L'attelle autonome 1000 ou attelle de "Boppe" permet une mise en place rapide de la traction du membre inférieur car ne nécessite pas l'utilisation d'un cadre complet, nous recommandons cette attelle pour de courte durée d'immobilisation (2 à 3 jours).

The Independent Splint or "Boppe" Splint allows a quick set up of the inferior limb traction because it does not require a complete frame; we recommend this splint only for a short immobilisation period (2 to 3 days).

### Dimensions - Sizes

1 • Tibia - Tibia	45cm (17.7")
2 • Cuisse - Thigh	30cm (11.8")
3 • Largeur - Width	24cm (9.4")
4 • Angle - Angle	45°

1000	4660000248	Attelle complète avec manchon Complete Splint with pads
2072	4650000274	Manchon de Rechange Exchange pads

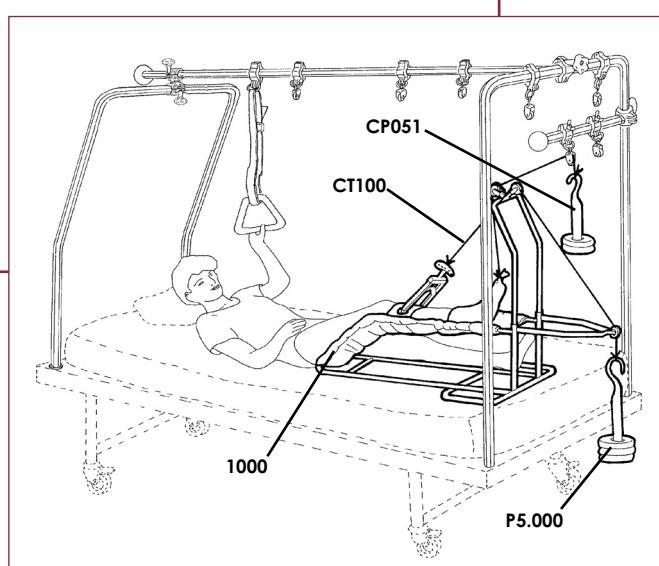

## Kit de Traction - Traction Set

### Kit 5 • 4655002556

Kit 5	4655002556
1000	4660000248
CT 100	4655000211
P 5.000	4655000542
CP 051	4655000188

### Kit complet

#### Le kit est composé de :

- Attelle d'immobilisation du genou (x1)
- Corde de traction (x1)
- Ensemble de poids de 5Kg (x1)
- Colonne porte poids (x1)

### Complete set

#### The set consists of these parts:

- Knee immobilisation splint (x1)
- Traction cord (x1)
- Set of weights 5Kgs (11 pounds)
- Weight carrier (x1)



# Les Pièces du Système - Parts of the System

## Attelle d'immobilisation - Immobilisation Splint

L'attelle 2060-2064 ou attelle de "Boehler" est une attelle de traction du membre inférieur permettant une grande stabilité et rigueur de positionnement du membre aussi bien dans l'axe du corps que avec une abduction de hanche. Etant suspendue au cadre complet elle facilite les soins de siège et le changement de la literie car rien ne touche le matelas. Livré avec une tube plié à mâchoire fixe de 70 cm.

Nous recommandons ces attelles pour de longue durée d'immobilisation. Existe en version adulte (2060) et enfant (2064).

### Dimensions des l'attelles

	2060 (Adulte)	2064 (Pédiatrique)
1 • Tibia	35 à 53cm	20 à 40cm
2 • Cuisse	26 à 45 cm	18 à 30cm
3 • Largeur	16 à 30cm	11 à 18cm

The splint 2060-2064 or the "Boehler" splint are traction splints of the lower limb allowing a big stability and a precise positioning of the member in the axis of the body as well as an hip abduction.

The complete suspension to the frame facilitates and ease bedding changes as none of the parts are in contact with the mattress. Delivered with a folded tube with a fixed clamp of 70cm (28").

We recommend those splints for a long term immobilisation period.  
Available in Paediatric version (2064) and Adult version (2060).



### Sizes splints

	2060 (Adult)	2064 (Paediatric)
1 • Tibia	35 to 53cm (14" to 21")	20 to 40cm (8" to 16")
2 • Thigh	26 to 45 cm (10" to 18")	18 to 30cm (7" to 12")
3 • Width	16 to 30cm (6" to 12")	11 to 18cm (4" to 7")

2060 Equi*	4660000280	Attelle Adulte complète avec manchon Complete Adult Splint with pads
2064 Equi*	4660000291	Attelle Pédiatrique complète avec manchon Complete Paediatric Splint with pads
2072	4650000274	Manchon de Rechange pour 2060 et 2064 Exchange pads for 2060 and 2064

Voir chapitre " Kit de traction " pour le kit complet avec poids et accessoires.

See "Traction Sets" Chapter for the complete set with weights and accessories.

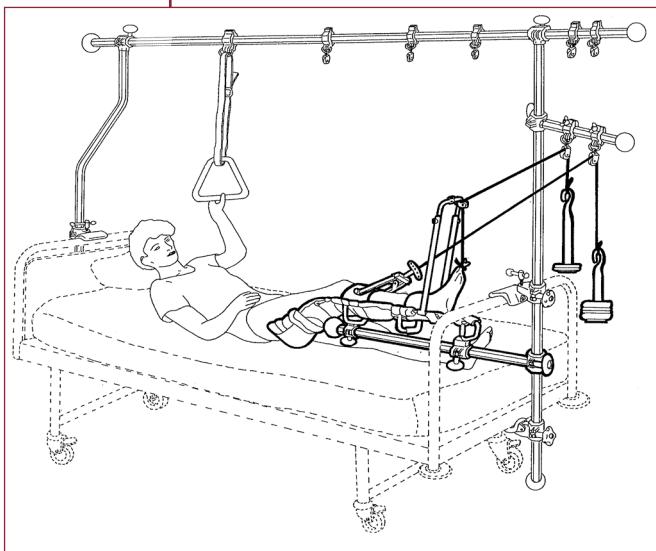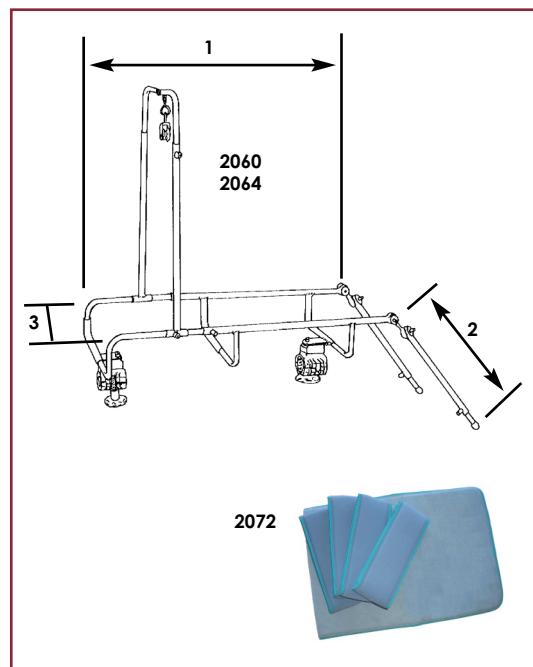


\* Sur un lit électrique, utiliser uniquement les éléments Kinetec désignés "Equi", permettant la continuité de terre.

\* On a electrical bed, please use only the Kinetec components describe as "Equi" (Medical Equipment Potential Equalization) allowing the grounding continuity.

# Les Montages sur différents lits - Assemblies on various beds

## Montage de base sur lit adulte - Universal fixation frame on adult bed

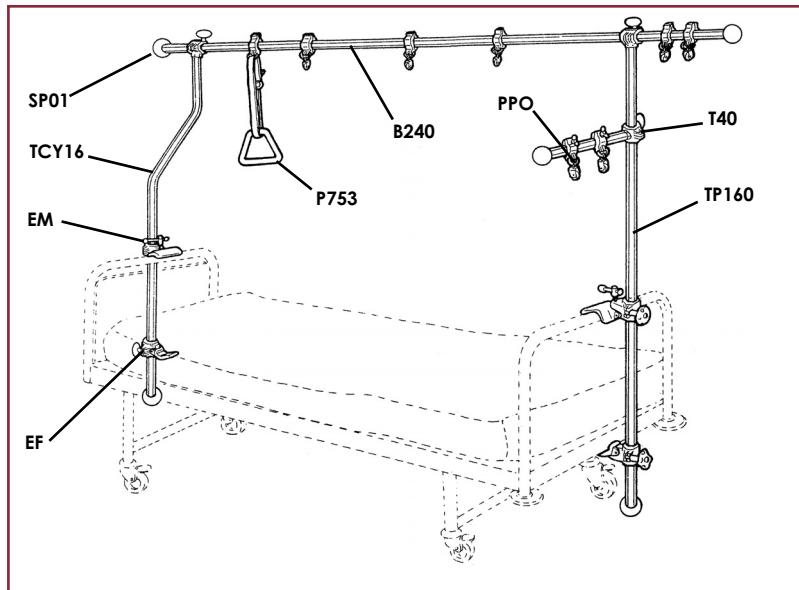

T1	4655002564
EM	4655000344
EF	4655000328
TCY16	4655000790
TP160	4655000857
B240	4655000071
T40	4655003067
P753	4655000948
PPO	4655000617
SP01	4635001304

### Montage complet


Le cadre est composé de :

Etau mobile (x2)
Etau fixe (x2)
Tube en « Col de cygne » à mâchoire pivotante de 160cm (x1)
Tube droit à mâchoire pivotante de 160cm (x1)
Barre octogonale de 240cm (x1)
Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)
Etrier de traction (x1)
Porte poulie ouverte (x7)
Sphère de protection (x5)

### Complete set

The frame consists of these parts:

Upper clamp (movable ) (x2)
Lower clamp (fixed) (x2)
Swivel clamp offset bar of 160cm (63") (x1)
Swivel clamp bar of 160cm (63") (x1)
Plain bar of 240cm (94") (x1)
Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
Handgrip (x1)
Opened pulley (x7)
Wall protection cushion (x5)

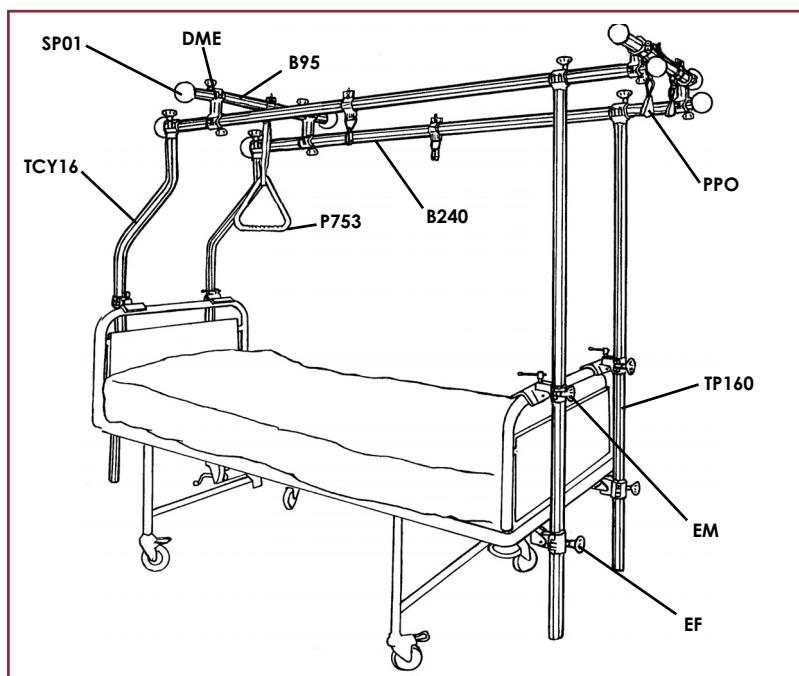

BALKAN	4655001772
EM	4655000344
EF	4655000328
TCY16	4655000790
TP160	4655000857
B240	4655000071
DME	4655000261
B95	4655000039
P 753	4655000948
SP 01	4635001304
PPO	4655000617

### Montage complet Balkan

Le cadre est composé de :

Etau mobile (x4)
Etau fixe (x4)
Tube en « col de cygne » de 160cm à mâchoire (x2)
Tube droit de 160cm à mâchoire pivotante (x2)
Barre octogonal de 240cm (x2)
Double mâchoire (x4)
Barre octogonal de 95cm (x2)
Etrier de traction (x1)
Sphère de protection (x8)
Porte poulie ouverte (x4)

### Complete set Balkan

The frame consists of these parts:

Upper clamp (x4)
Lower clamp (x4)
Swivel clamp offset bar of 160cm (63") (x2)
Straight bar with swivel clamp 16cm (63") (x2)
Plain bar of 240cm (94") (x2)
Double fixed clamp (x4)
Octagonal bar of 95cm (37") (x2)
Handgrip (x1)
Wall protection cushion (x8)
Open pulley with clamp (x4)


# Les Montages sur différents lits - Assemblies on various beds

## Montage parcellaire sur lit adulte - Partial assembling on adult bed

Utilisable sur lit équipé de cintres métalliques en tête et en pied, avec sommier fixe.


Only for bed equipped with steel porch, with fixed frame.

**MP1 • 4655001821**

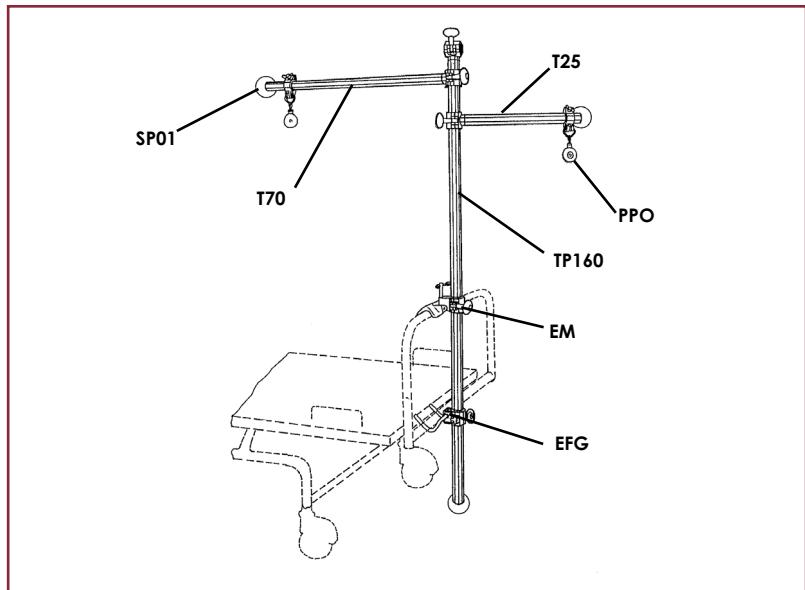

MP1	4655001821	Montage parcellaire tête de lit Le cadre est composé de :	Assembling in head bed The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x1)	Upper clamp (x1)
EFG	4655000336	Etau fixe à griffe (x1)	Lower clamp with special laws (x1)
TP160	4655000857	Tube droit de 160cm à mâchoire pivotante (x1)	Straight bar with swivel clamp 16cm (63") (x1)
T70 Equi	4655003207	Tube droit à mâchoire de 70cm (x1)	Fixed clamp bar of 70cm (28") (x1)
T25 Equi	4655003083	Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)	Fixed clamp bar of 25cm (10") (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x3)	Wall protection cushion (x3)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x2)	Open pulley with clamp (x2)


**MP3 • 4655002647**

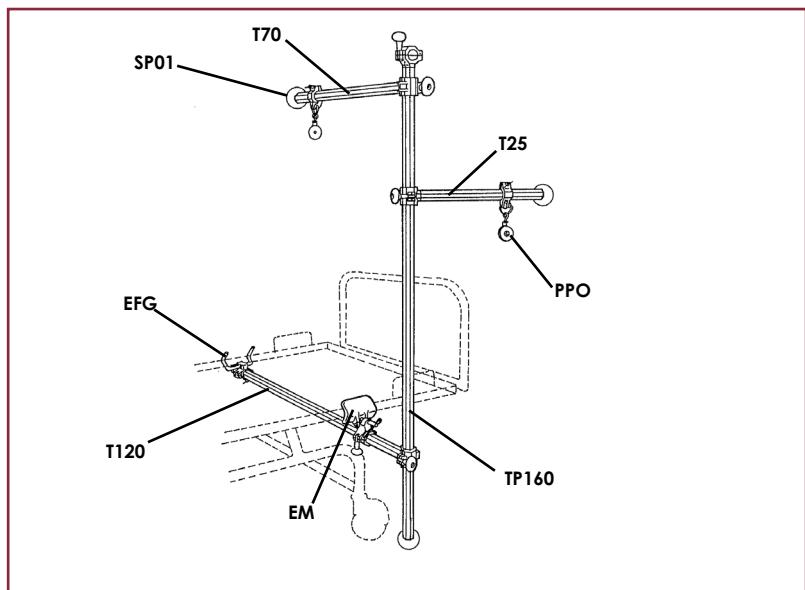

MP3	4655002647	Montage parcellaire transversal au lit Le cadre est composé de :	Assembling in transversal of the bed The frame consists of these parts:
EM	4655000344	Etau mobile (x1)	Upper clamp (x1)
EFG	4655000336	Etau fixe à griffe (x1)	Lower clamp with special laws (x1)
T120	4655000782	Tube droit à mâchoire de 120cm (x1)	Fixed clamp bar of 120cm (47") (x1)
TP160	4655000857	Tube droit de 160cm à mâchoire pivotante (x1)	Straight bar with swivel clamp 16cm (63") (x1)
T70 Equi	4655003207	Tube droit à mâchoire de 70cm (x1)	Fixed clamp bar of 70cm (28") (x1)
T25 Equi	4655003083	Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)	Fixed clamp bar of 25cm (10") (x1)
SP 01	4635001304	Sphère de protection (x3)	Wall protection cushion (x3)
PPO	4655000617	Porte poulie ouverte (x2)	Open pulley with clamp (x2)

# Les Montages sur différents lits - Assemblies on various beds

## Montage de base sur lit pédiatrique - Universal fixation frame on paediatric bed

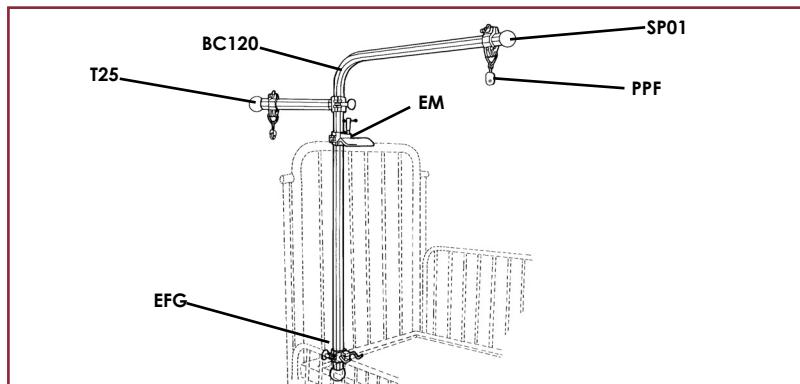

CP2	4655001756
EM	4655000344
EFG	4655000336
BC 120	4655000097
T25 Equi	4655003083
PPF	4655000625
SP01	4635001304

### Montage complet

Le cadre est composé de :


- Etai mobile (x1)
- Etai fixe à griffe (x1)
- Barre coude de 120cm (x1)
- Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)
- Porte poulie fermée (x2)
- Sphère de protection (x3)

### Complete set

The frame consists of these parts:

- Upper clamp (movable) (x1)
- Lower clamp with special laws (x1)
- "L" Shaped bar 120cm (47") (x1)
- Fixed clamp bar of 25cm (10") (x1)
- Closed pulley (x2)
- Wall protection cushion (x3)

CP2 • 4655001756

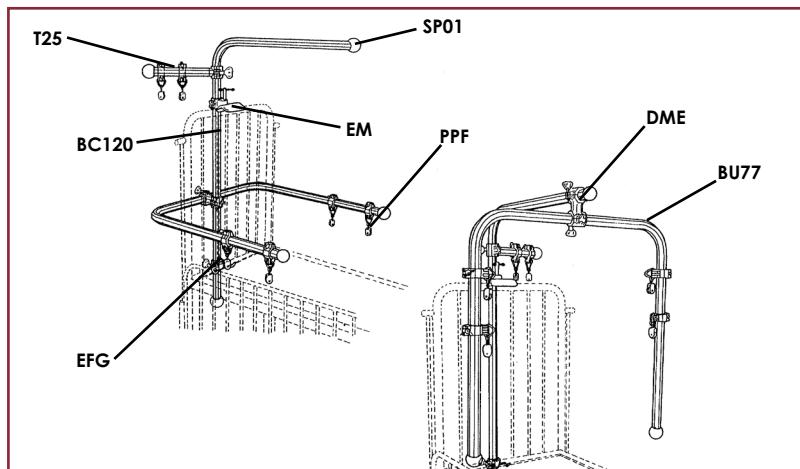

CP3	4655001839
EM	4655000344
EFG	4655000336
BC 120	4655000097
DME	4655000261
BU77	4655000120
T25 Equi	4655003083
PPF	4655000625
SP01	4635001304

### Montage complet

Le cadre est composé de :

- Etai mobile (x1)
- Etai fixe à griffe (x1)
- Barre coude de 120cm (x1)
- Double mâchoire (x1)
- Barre en « U » de 77x80cm (x1)
- Tube droit à mâchoire de 25cm (x1)
- Porte poulie fermée (x6)
- Sphère de protection (x5)

### Complete set

The frame consists of these parts:

- Upper clamp (movable) (x1)
- Lower clamp with special laws (x1)
- "L" Shaped bar 120cm (47") (x1)
- Double fixed clamp (x1)
- "U" shaped bar 77x80cm (30x32") (x1)
- Fixed clamp bar of 25cm (10") (x1)
- Closed pulley (x6)
- Wall protection cushion (x5)

CP3 • 4655001839


Potence bilatérale pour abduction-dérotation des luxations congénitales de hanche.

Bilateral pulling force for abduction-derotation of congenital dislocation of the hip.

### T-Maximo • 4655004057

Potence bilatérale pour abduction-dérotation des luxations congénitales de hanche.

Bilateral pulling force for abduction-derotation of congenital dislocation of the hip.

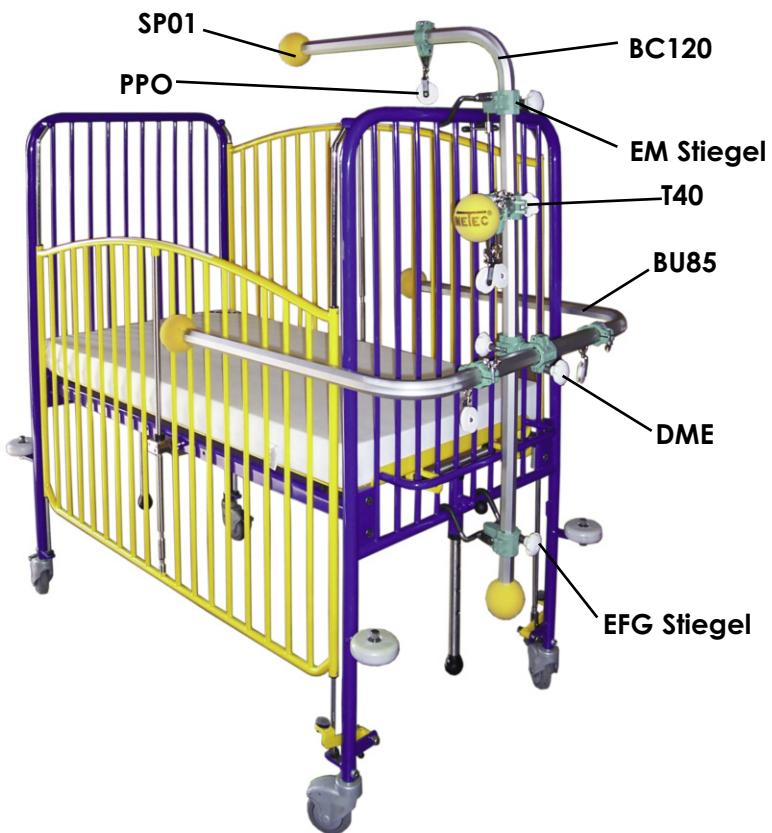

**Adaptation spéciale pour lit parcs à 2 côtés coulissants**

**Special adaptation for cots with 2 sliding sides**

### T-Maximo . 4655004057 ...Montage complet .....Complete set

**Le cadre est composé de : .....The frame consists of these parts:**

EF Stiegel .....	4655003570 .....	Etau fixe spécial Stiegelmeyer (x1) .....	Stiegelmeyer lower clamp (x1)
EM Stiegel .....	4655003562 .....	Etau mobile spécial Stiegelmeyer (x1) .....	Stiegelmeyer upper clamp (x1)
DME Equi .....	4655003059 .....	Double mâchoires (x1) .....	Double clamp (x1)
BC 120 .....	4655000097 .....	Barre cintrée de 120cm (x1) .....	"L" shaped bar of 120cm (47") (x1)
BU 85 .....	4655003588 .....	Barre en « U » (x1) .....	"U" shaped bar (x1)
T 40 Equi .....	4655003067 .....	Tube à mâchoire fixe de 40cm (x2) .....	Fixed clamp bar of 40cm (16") (x2)
SP 01.....	4635001304 .....	Sphère de protection (x5) .....	Wall protection cushion (x5)
PPO .....	4655000617 .....	Porte poulie ouverte (x5) .....	Open pulley with clamp (x5)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.


Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)

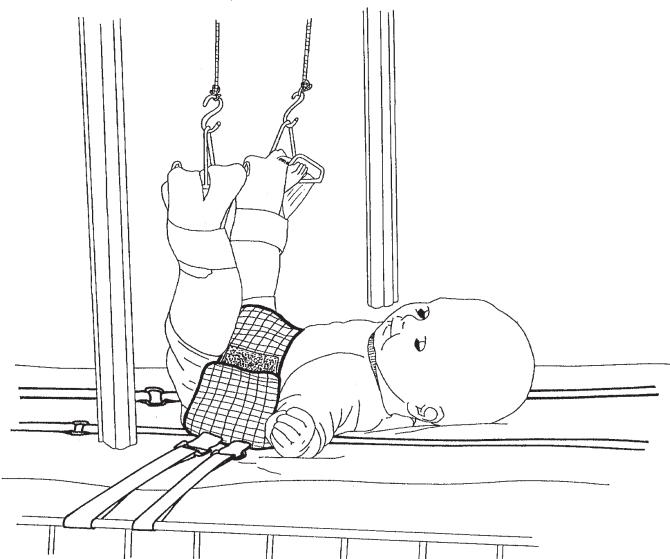

## Corset de Maintien Corset

Ce dispositif permet le maintien d'un enfant de moins de 10 ans pendant sa mise en traction.

*This disposal allows the maintain of the child during the traction.*

CS1	4650000018	Petit Modèle (de 0 à 2 ans)	Small Model (from 0 to 2 years)
CS2	4650000026	Moyen Modèle (de 2 à 3 ans)	Medium Model (from 2 to 3 years)
CS3	4650000034	Grand Modèle (de 3 à 10 ans)	Large Model (from 3 to 10 years)

AFIN D'ASSURER UNE HYGIENE MAXIMUM, CHANGER LE CORSET A CHAQUE NOUVEAU PATIENT.

#### NETTOYAGE :

Lavage à 30°C avec utilisation d'un désinfectant au cours du cycle de rinçage.

Exemple de produits de désinfection ; solution Bac linge à 0,125% ou Souplanios à 0,125% des Laboratoires ANIOS.

TO ENSURE MAXIMUM HYGIENE, CHANGE THE CORSET FOR EACH NEW PATIENT.

#### CLEANING

Washing at 30 ° C with use of a disinfecting solution during the rising cycle.

Example of product which can be used: Solution « Bacling » at 0.125 % or « Souplanios » at 0,125% from ANIOS Laboratory.

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

 Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.


Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

 Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.


Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)



### Etrier de Kirschner - Grand modèle • 4665002728 Kirschner Pin holder - Large

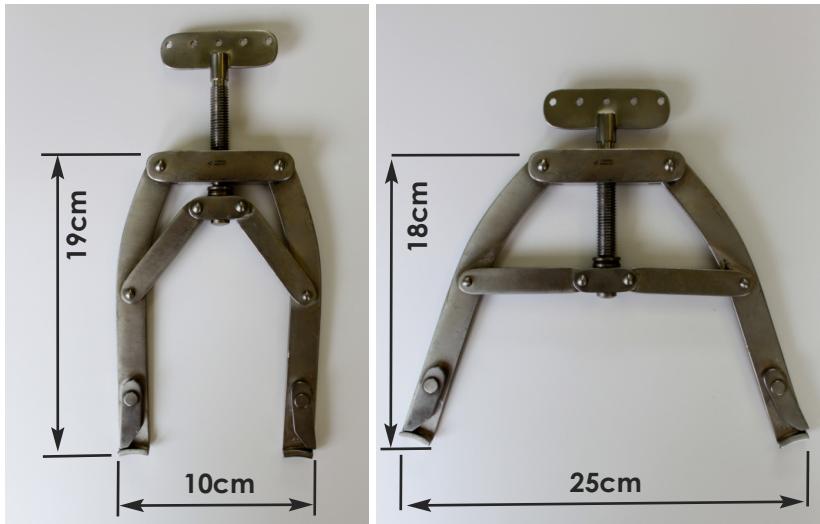

### Etrier de Kirschner - Petit modèle • 4665005516 Kirschner Pin holder - Small

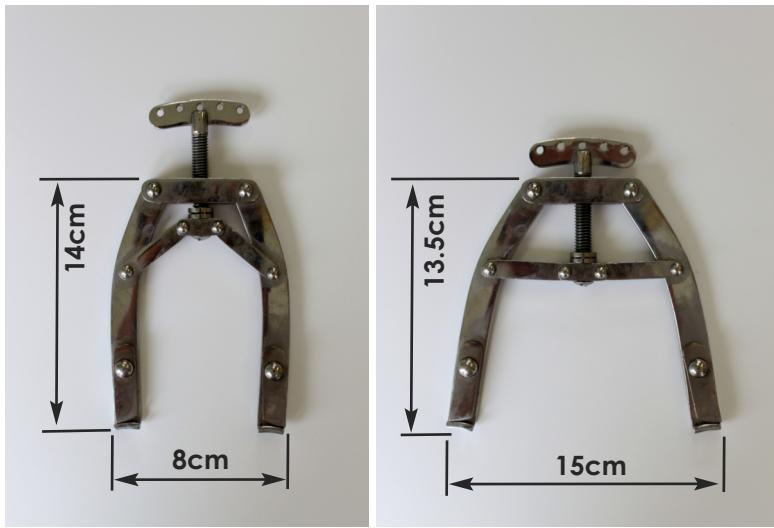

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.




Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)

### Kit 1 - A Equi • 4655003108

### Kit 1 - E Equi • 4655003116

Traction / Suspension du membre inférieur  
Traction / Suspension of inferior limb

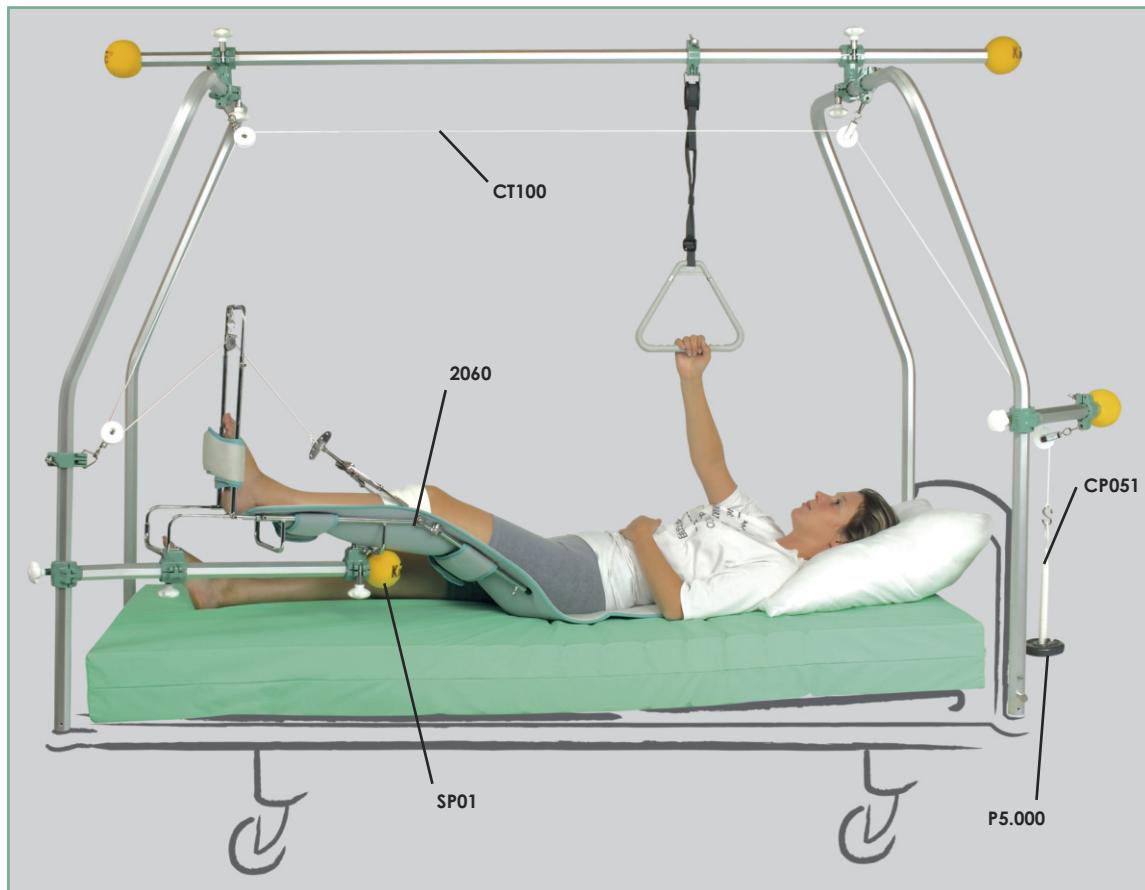

Exemple de montage.  
Example of setup.

#### Kit 1 A Equi      4655003108

2060 Equi	4660000280
CT 100	4655000211
P 5.000	4655000542
CP 051	4655000188
SP 01	4635001304

#### Kit 1 E Equi      4655003116

2064 Equi	4660000291
CT 100	4655000211
P 5.000	4655000542
CP 051	4655000188
SP 01	4635001304

#### Kit complet pour Adulte

##### Le kit est composé de :

Attelle d'immobilisation du genou (x1)
Corde de traction (x1)
Ensemble de poids de 5Kg (x1)
Colonne porte poids (x1)
Sphère de protection (x1)

#### Complete set for Adult

##### The set consists of these parts:

Knee immobilisation splint (x1)
Traction cord (x1)
Set of weights 5Kgs (11 pounds)
Weight carrier (x1)
Wall protection cushion (x1)

#### Kit complet pour Enfant

##### Le kit est composé de :

Attelle d'immobilisation du genou (x1)
Corde de traction (x1)
Ensemble de poids de 5Kg (x1)
Colonne porte poids (x1)
Sphère de protection (x1)

#### Complete set for Children

##### The set consists of these parts:

Knee immobilisation splint (x1)
Traction cord (x1)
Set of weights 5Kgs (11 pounds)
Weight carrier (x1)
Wall protection cushion (x1)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.


Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)



### Kit 6 Equi • 4655003596


Traction / Suspension du membre inférieur  
Traction / Suspension of inferior limb

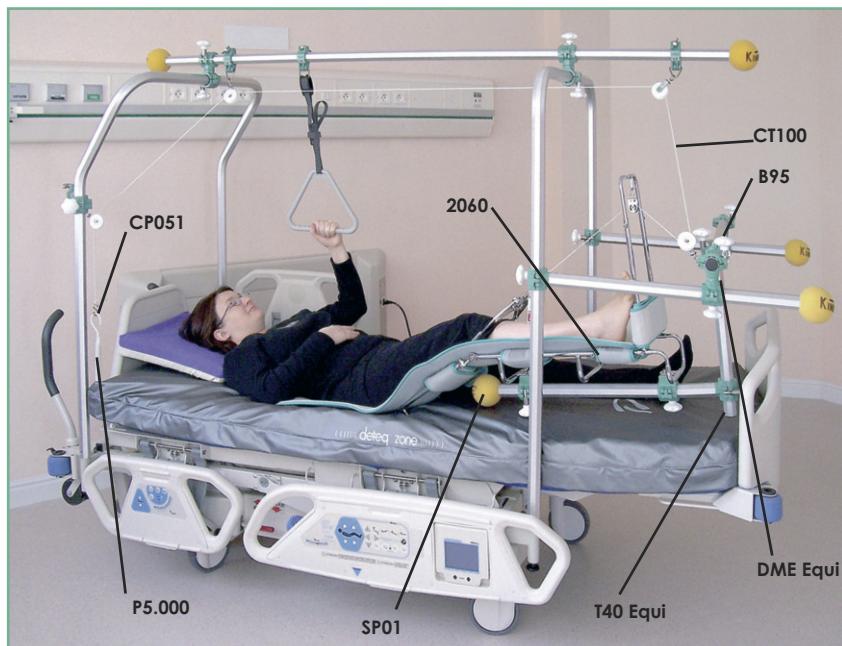

Avec positionnement d'une attelle 2060 pour une Abduction de hanche à 0° (sur cadre avec portique).

With positioning of a splint 2060 for an Abduction of hip with 0° (on frame with porch)

Exemple de montage sur lit TotalCare.  
Example of setup on TotalCare bed.

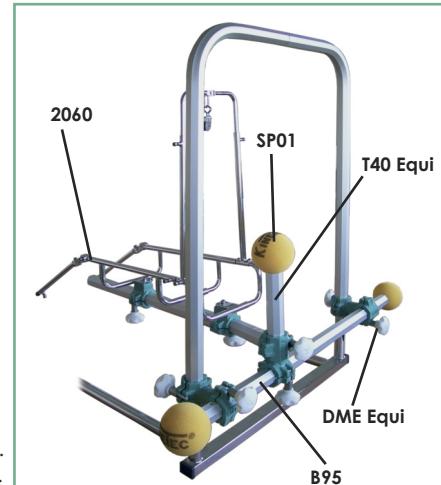

Exemple de montage sur cadre de démonstration.  
Example of setup on demo traction frames.

Kit 6 Equi	4655003596
2060 Equi	4660000280
DME Equi	4655003059
T 40 Equi	4655003067
B95	4655000039
CT 100	4655000211
P 5.000	4655000542
CP 051	4655000188
SP 01	4635001304

#### Kit complet

##### Le kit est composé de :

- Attelle d'immobilisation du genou (x1)
- Double mâchoire (x2)
- Tube à mâchoire fixe de 40cm (x1)
- Barre de 95cm (x1)
- Corde de traction (x1)
- Ensemble de poids de 5Kg (x1)
- Colonne porte poids (x1)
- Sphère de protection (x1)

#### Complete set

##### The set consists of these parts:

- Knee immobilisation splint (x1)
- Double clamp (x2)
- Fixed clamp bar of 40cm (16") (x1)
- Bar 95cm (37") (x1)
- Traction cord (x1)
- Set of weights 5Kgs (11 pounds)
- Weight carrier (x1)
- Wall protection cushion (x1)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.


Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)



### Kit 3 • 4655002530

Suspension pelvienne  
Pelvic suspension

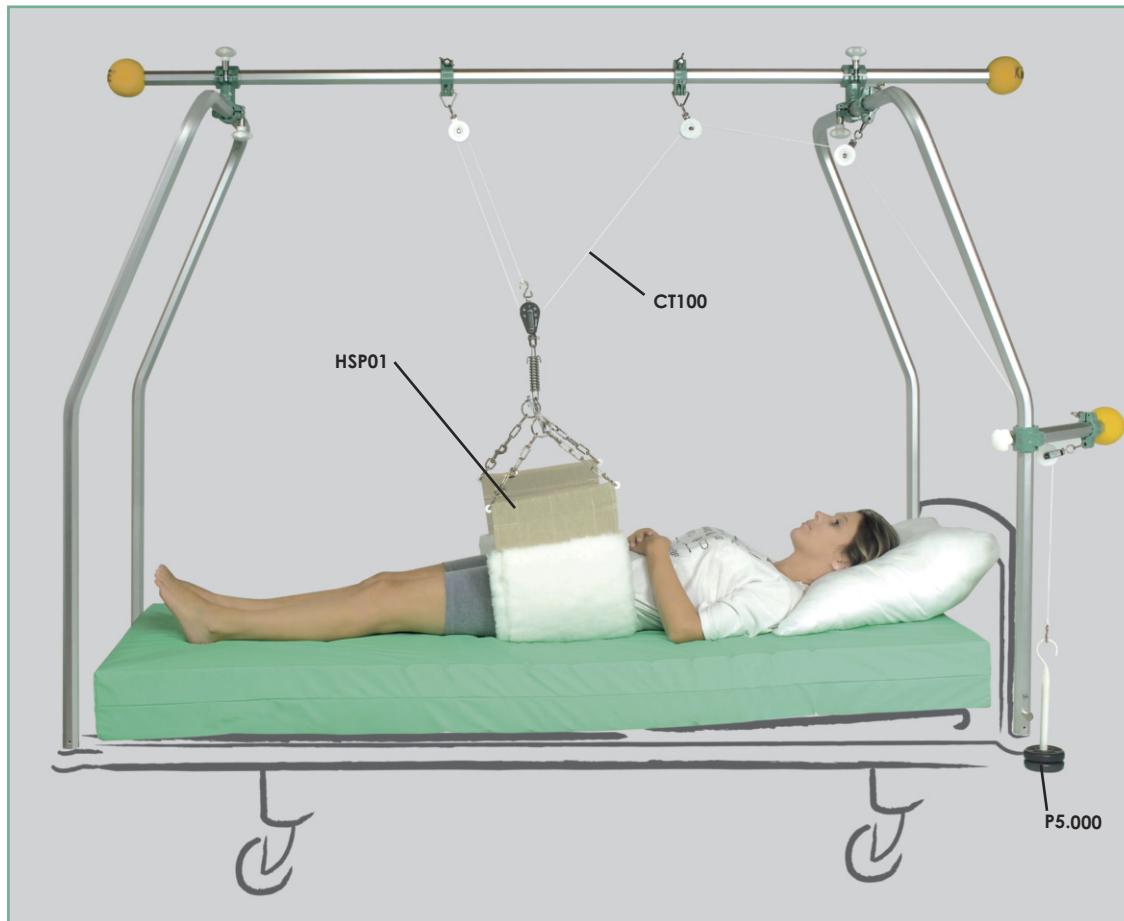

Exemple de montage.  
Example of setup.

Kit 3	4655002530
HSP01	4655000451
HSP11	4650000065
CT 100	4655000211
P 5.000	4655000542

#### Kit complet

Le kit est composé de :

- Hamac de suspension pelvienne (x1)
- Manchon de recharge (option)
- Corde de traction (x1)
- Ensemble de poids de 5Kg (x1)

#### Complete set

The set consists of these parts:

- Complet pelvic sling (x1)
- Exchange pads (optional)
- Traction cord (x1)
- Set of weights 5Kgs (11 pounds)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.


Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)



### Kit 2 Equi • 4655003124

Traction / Suspension du membre supérieur  
Traction / Suspension of superior limb

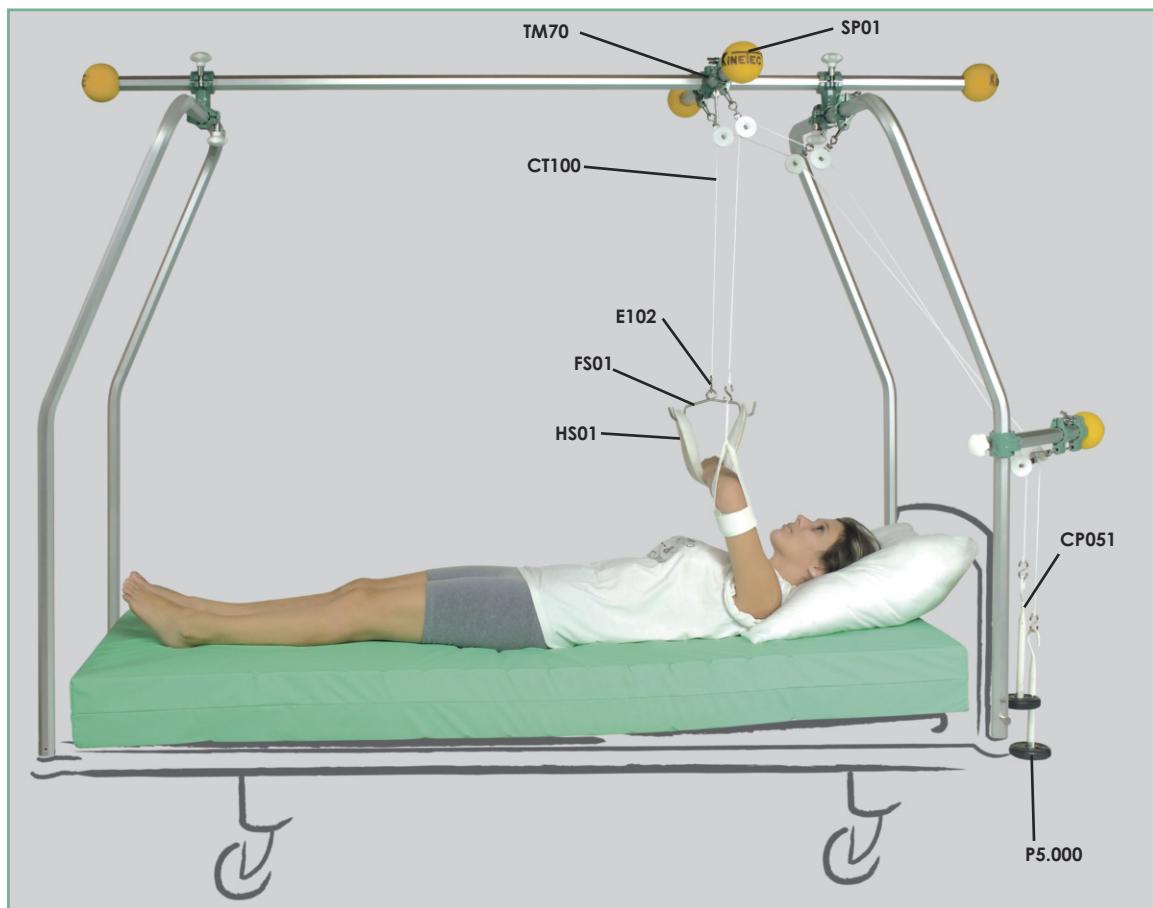

Exemple de montage.  
Example of setup.

Kit 2 Equi	4655003124	Kit complet	Complete set
HS 01	4650000042	<b>Le kit est composé de :</b>	<b>The set consists of these parts:</b>
FS 01	4655000360	Hamac de suspension petit modèle (x1)	Small hammock (x1)
E 102	4655000302	Fléau de suspension petit modèle x1)	Small spreader bar (x1)
CT 100	4655000211	Lot de 10 esses moyen modèle (x1)	Set of ten medium S-hooks (x1)
TM 70 Equi	4655003158	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
P 5.000	4655000542	Tube de 2x35cm à mâchoire centrale (x1)	Center clamp bar of 2x35cm (14") (x1)
CP 051	4655000188	Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)
SP 01	4635001304	Colonne porte poids (x1)	Weight carrier (x1)
		Sphère de protection (x2)	Wall protection cushion (x2)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.




Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)

### Kit 4 • 4655002548

Traction cervicale  
Cervical traction

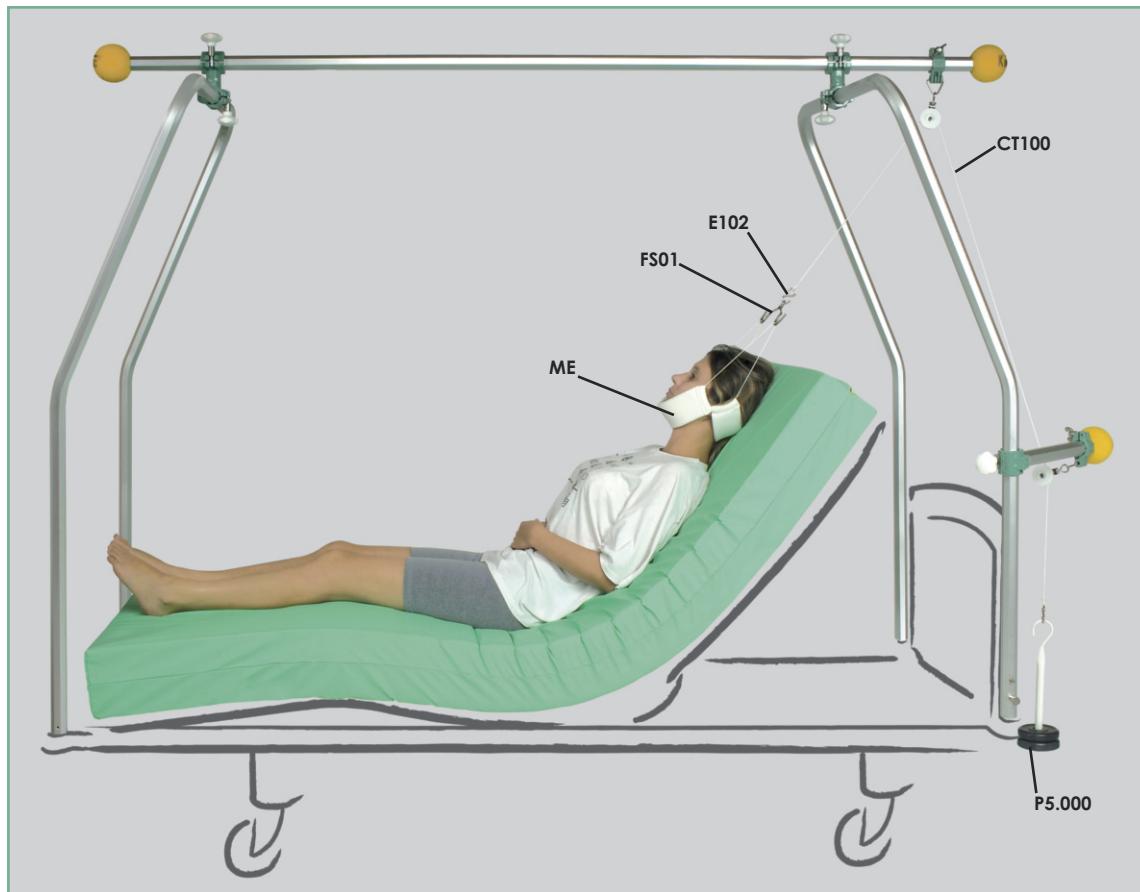

Exemple de montage.  
Example of setup.

Kit 4	4655002548	Kit complet	Complete set
ME	4650000117	Le kit est composé de :	The set consists of these parts:
FS 01	4655000360	Mentonnière (x1)	Cervical collar (x1)
E 102	4655000302	Fléau de suspension petit modèle (x1)	Small spreader bar (x1)
CT 100	4655000211	Lot de 10 esses moyen modèle (x1)	Set of ten medium S-hooks (x1)
P 5.000	4655000542	Corde de traction (x1)	Traction cord (x1)
		Ensemble de poids de 5Kg (x1)	Set of weights 5Kgs (11 pounds)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.



Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® TRACTION System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.



Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positionning splints, and more...)





**Kinetec SAS**

Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



[contact@kinetec.fr](mailto:contact@kinetec.fr)



[www.kinetec.fr](http://www.kinetec.fr)

